



STARLIGHT UNO

■ no más lámparas pesadas

Los compositos de fotocurado pueden ser trabajo duro. 10, 20, a veces hasta 40 segundos pueden ser increíblemente largos si tu lámpara de fotocurado es muy pesada.

► comienza el peso pluma

Solo 77 g y simple mango gracias a un solo boton de control – descubre el nuevo mundo del poderoso fotocurado.



► 3 Vatios LED

Trabaja en máxima eficiencia con 3 Vatios LED seleccionados y con una intensidad de luz de más de 1.500 mW/cm².


► peso

Solo 77 g.




► batería removible de litio

La batería removible de litio te permite 240 ciclos de trabajo de 10 segundos.

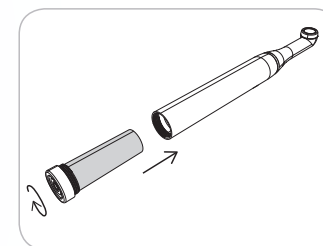


► mangas protectoras

Las mangas protectoras previenen la contaminación directa de la lámpara.

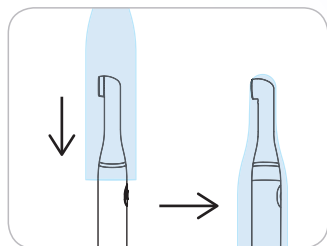

► espectro luminoso

El espectro luminoso de 440 a 480 nm está enfocado en camphorquinona, un fotoiniciador usado en 98% de materiales dentales.

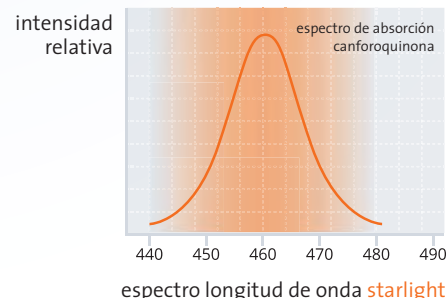



STARLIGHT PRO + STARLIGHT ORTHO

■ pasa de lo lioso

La mayoría de las lámparas polimerizadoras pueden resultar difíciles de manejar o de ajustar y no consiguen seguir el ritmo más intenso de trabajo.

► pasa al trabajo cómodo

Que te parece trabajar por fin sin obstáculos? Starlight pro no tiene cables, se acciona con un solo pulsador y es ultra-ligera. Se puede desplazar y utilizar donde más quieras.



► starlight ortho

Diseñado para necesidades de ortodoncia.

- cura todos los materiales fotocurables utilizados en ortodoncia de manera rápida y eficiente.
- tiempo de exposición de 5 segundos y 10 segundos.
- permite fotocurar los braquets de todo el cuadrante pulsando un solo botón.



► batería de iones de litio

La batería de iones de litio llega a 320 ciclos de 10 segundos cada uno y se carga en tan solo 90 minutos.



► conexión click-click

El exclusivo sistema de conexión de la fibra con la pieza de mano es de metal y asegura una óptima transmisión del rayo de luz.



► peso

Solo 105 gramos.




► fibra óptica

La fibra óptica (8 mm de diámetro) esterilizable se compone de numerosos filamentos que aseguran una perfecta transmisión de la luz.



► espectro luminoso

Las lámparas starlight emiten luz con una longitud de onda entre 440 y 480 nm. Tiene un efecto muy eficaz en la Canforoquinona, utilizada como fotoiniciador en el 98% de los materiales en venta.

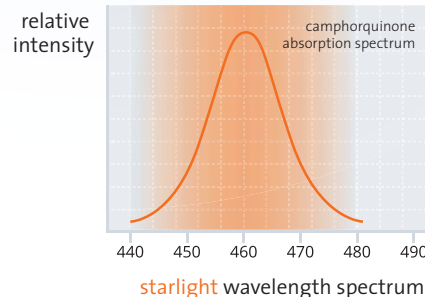

► alto nivel de prestaciones

La potencia superior a 1400 mW/cm² permite endurecer una capa de 2mm en solo 10 segundos.

