



MEDIT *i700* wireless



Haga magia con un simple toque

Adquiera el poder de llevar su práctica al siguiente nivel

Más allá de la tecnología probada del *i700*

Sigue siendo el mismo *i700*, súper rápido, ligero y preciso. **Pero ahora wireless.**



Fuera cables

Sin cables, el escaneo es cómodo desde cualquier ángulo. Escanee áreas proximales sin esfuerzo y sin restricciones de movimiento



Rápido. Preciso. Conectado.

La velocidad de escaneo es de 70 FPS*. Podrá comprobar la tecnología tremendamente suave y rápida del modelo más vendido de Medit. Disfrute de la alta velocidad del *i700* de forma inalámbrica y sin problemas.



Compacto y ligero

Excelente equilibrio de peso incluso con una batería conectada para mayor comodidad.




Un Hardware potente que se mezcla con el Software más versátil

Optimizado para la comodidad. No solo desde aspectos de hardware, sino también de software. *i700* inalámbrico, repleto de lo último en tecnología MEDIT.

*Frames per second: número de fotogramas de datos escaneados por segundo.

- Precisión de arco completo: $10,9 \mu\text{m} \pm 0,98$
- Hasta 70 FPS

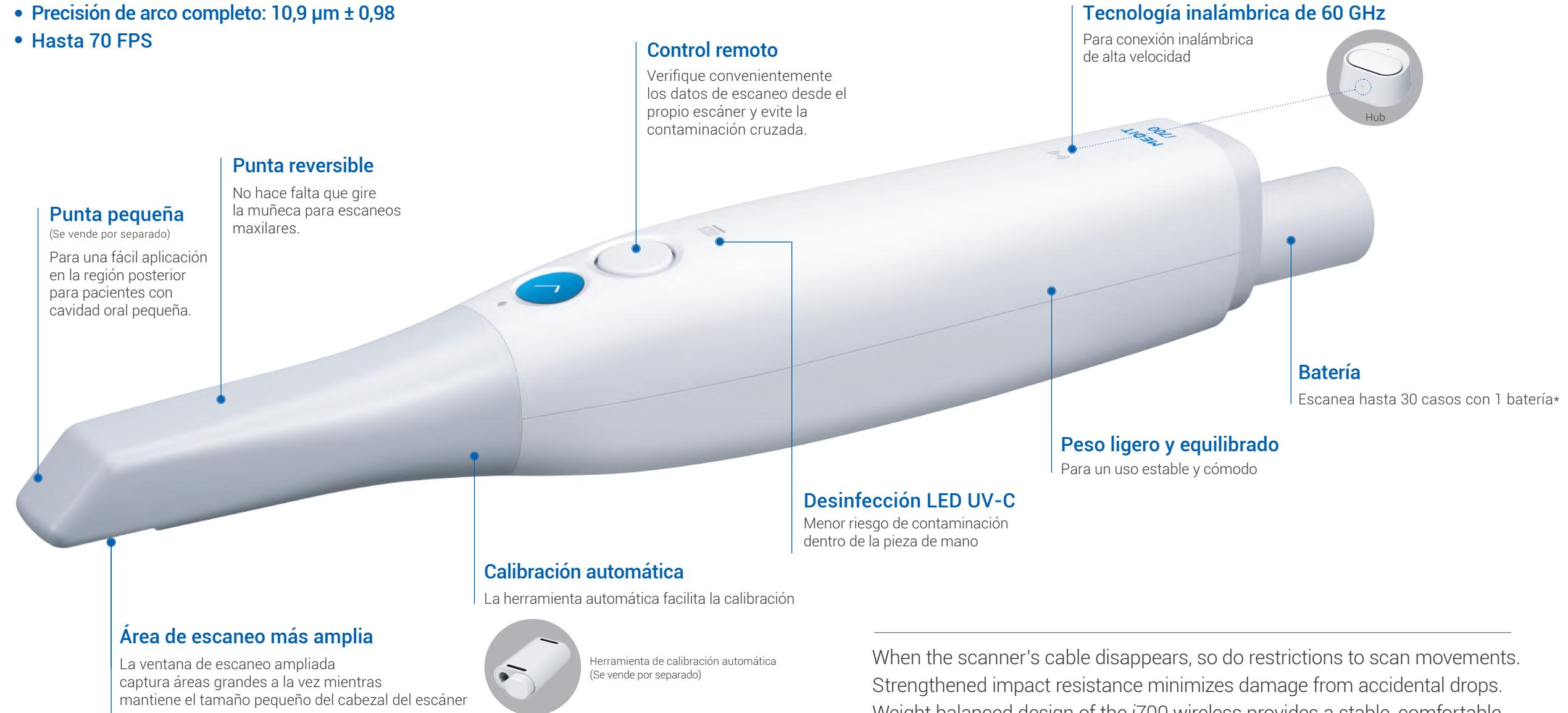

When the scanner's cable disappears, so do restrictions to scan movements. Strengthened impact resistance minimizes damage from accidental drops. Weight balanced design of the *i700* wireless provides a stable, comfortable scanning experience.

*El rendimiento puede variar según las condiciones de uso.




La batería con más duración

1 hora de escaneo continuo, **hasta 8 horas** en standby.




Escaneo durante todo el día con una sola batería. No se preocupe de la carga.

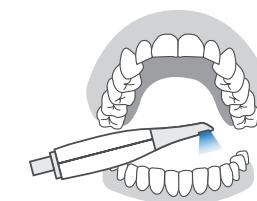

Maxilar + Mandibular + Oclusión
Escaneo en **2 mins***




Escanee hasta **30 casos** con 1 carga

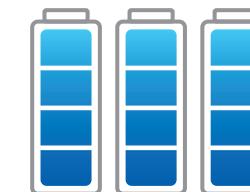

Hasta **90 casos** con las 3 baterías incluidas



La función inteligente de administración de energía cambia automáticamente el dispositivo al modo de suspensión cuando no está en uso, en espera de hasta 8 horas. Solo toma unos segundos activar el dispositivo para escanear.

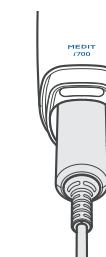

Conexión de alimentación por cable:

Una vez que haya usado las 3 baterías incluidas, simplemente conecte el cable de alimentación y siga usando el dispositivo.


*El rendimiento puede variar según las condiciones de uso.

Escaneo mágico: Nunca había sido tan sencillo



Experimente una odontología digital increíble con **Medit Scan para Clínicas**. Nuestra tecnología de software de vanguardia hace que escanear sea más cómodo para usted.

Para asistencia de escaneo

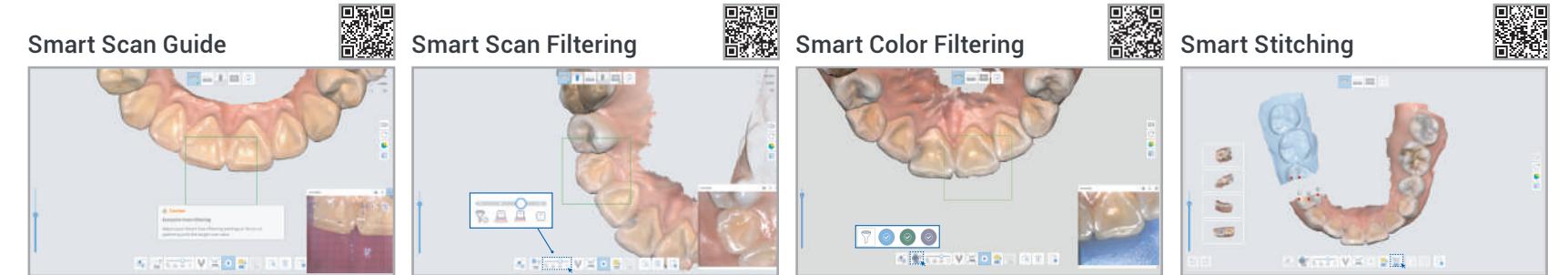


La guía de usuario reforzada brinda ayuda para las anomalías detectadas durante el escaneo.

El rendimiento mejorado del filtrado de IA facilita el proceso de escaneo al filtrar los tejidos blandos como los labios, las mejillas y la lengua.

Filtra automáticamente los colores registrados, como el color de los guantes médicos, durante el escaneo.

Escanee con su propia estrategia de escaneo. Los datos de escaneo fragmentados se alinean con el área común detectada automáticamente.

Para obtener datos de escaneo más precisos y exactos

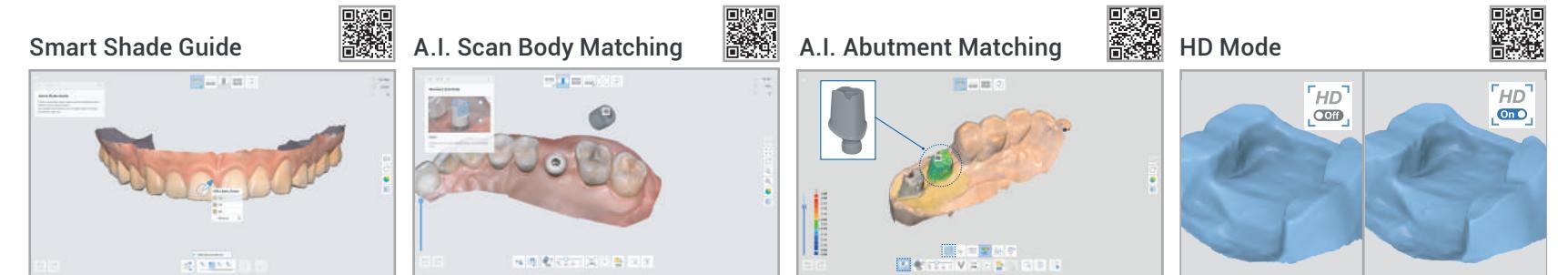

Distingue y sugiere automáticamente el mejor tono coincidente de los datos escaneados.

Asegura datos precisos del cuerpo de escaneo en áreas difíciles de escanear, como la región posterior.

Asegura datos de margen precisos en situaciones difíciles de escanear.

Obtenga una imagen escaneada más nítida en el área del margen con el modo HD actualizado.

Medit Link

Empiece a gestionar los datos de su clínica con **Medit Link**.



Puede crear y administrar datos de escaneo que coincidan con la información del paciente en el programa de gráficos electrónicos y vincularlos con soluciones de tratamiento de varios flujos de trabajo. Las diversas aplicaciones de Medit Link App Box ayudan a proporcionar una consulta de mayor nivel, más fácil de entender para los pacientes.

El almacenamiento en la nube de Medit Link cifra y almacena datos para una protección confiable contra ataques de virus y ransomware. También permite el intercambio de datos y la comunicación en tiempo real entre dentistas, pacientes y técnicos de laboratorio en cualquier momento y en cualquier lugar en un PC, una tableta o cualquier dispositivo móvil con conexión a Internet.

Odontología digital con **Medit Link & Medit Apps**

Digitalice su tratamiento con Medit Link



Use sus datos de escaneo para mucho más

Los datos de escaneo creados con Medit i700 wireless se pueden vincular al flujo de trabajo de varios proveedores de soluciones a través de Medit Link. Los datos también se pueden usar con cualquier software que pueda abrir formatos 3D estándar como STL, PLY y OBJ. y la amplia utilización de nuestro sistema abierto se está expandiendo mientras hablamos.

Sus posibilidades con Medit Link

Alineadores transparentes | Coronas y puentes | Restauraciones implantosoportadas | Prótesis total y parcial Ortodoncia | Guías quirúrgicas de implantes | Dispositivos para la apnea del sueño | Modelos dentales | Impresión 3D...




Medit Apps


Las aplicaciones Medit introducen rápidamente flujos de trabajo digitales utilizando datos escaneados y lo ayudan a utilizarlos en una amplia gama de casos. Puede analizar datos, crear restauraciones y modelos, y comunicarse con sus pacientes de la forma más sencilla. Con Medit Apps, se puede hacer mucho más en el consultorio, como diseñar sprints, provisionales, puentes, ¡y así sucesivamente! Por cierto, no necesita tener un escáner Medit o pagar una tarifa anual enorme para unirse al Ecosistema Medit. Siéntase literalmente libre de disfrutar de la odontología digital con Medit Apps.

→ [Vea la página siguiente y descubra **Medit Ecosystem**](#)

Medit Apps

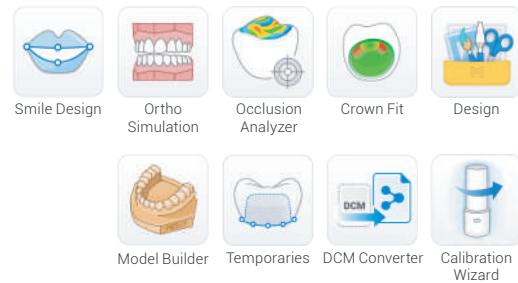

Gestión de prácticas e imágenes

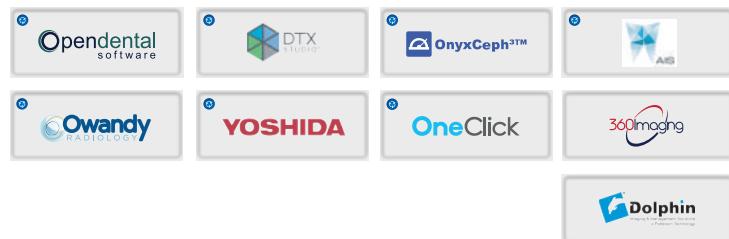

CAD Dental y Diseño de Sonrisa



Apnea del sueño




Integración


Impresión 3D



Alineadores transparentes

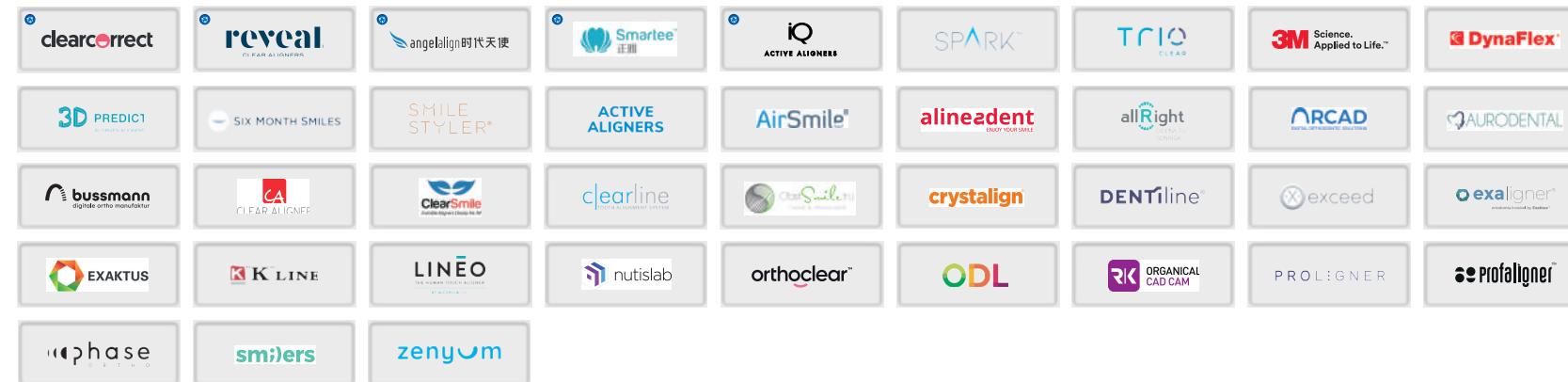

Otros

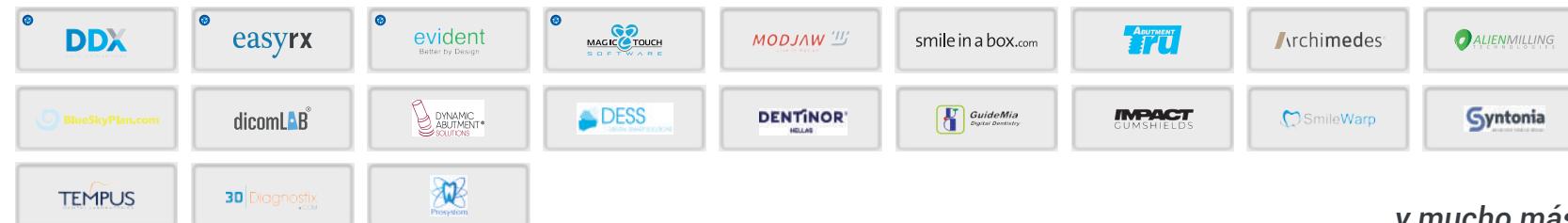

...y mucho más!

Especificaciones

Categoría		Medit i700 wireless
Tecnología de escaneo	Marco de escaneo	Hasta 70 FPS
	Tecnología de imagen	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura de transmisión en 3D a todo color
	Fuente LED	LED
	Tecnología antivaho	Antivaho adaptativo
Precisión	Full-Arch	10.9µm ± 0.98
Pieza de mano	Dimensiones	313 x 44 x 47.4 mm
	Peso total	328 g (Incluída la batería y la punta)
Punta	Tamaño de la punta	22.5 x 17.1 mm
	Área de escaneo	15 x 13 mm
	Autoclavable	Autoclave 150 veces 121°C 30 mins (Gravity Type) 134°C 4 mins (Pre-Vacuum Type) 135°C 10 mins (Gravity Type)
	Punta reversible	Sí
Modo especial	Modo de control remoto	Sí
	Desinfección UV-C	Sí
Conectividad		Wireless USB 3.1 Gen1 (Wireless Hub)



Escanee el código QR para conocer los requisitos [actualizados del sistema](#). >>

Sobre Medit

Medit se especializa en soluciones de medición 3D y CAD/CAM para clínicas y laboratorios dentales, incluidos los escáneres intraorales, basados en su propia tecnología de punta patentada. También desarrollamos soluciones de plataforma para odontología digital, que admiten flujos de trabajo colaborativos. Además, la línea Solutionix ofrece escáneres 3D y software para el mercado industrial. Nuestro objetivo es proporcionar tecnología innovadora y productos de la más alta calidad para garantizar el crecimiento mutuo de todos los socios.

La comunidad Medit

Comentarios continuos, sugerencias de nuevos flujos de trabajo de tratamiento y discusión activa.

Desde debates candentes hasta charlas divertidas, la comunidad de Medit siempre está animada con nuestros apasionados clientes. Colegas de todo el mundo se apoyan y ayudan activamente unos a otros, y sinceramente dan la bienvenida a nuevos colegas a la odontología digital.

¡Escanee el código QR para unirse!

Medit y su comunidad de colegas lo apoyan y le desean la mejor de las suertes en su nuevo viaje hacia la odontología digital.



User Group



Medit Academy



Help Center





www.medit.com